



DERMANET AG® WOUND DRESSING
DERMANET AG® BORDER DRESSING

APÓSITO PARA HERIDAS DERMANET AG®
APOSITO CON BORDE DERMANET AG®

CURATIVO PARA FERIDAS DERMANET AG®
CURATIVO DE BORDA DERMANET AG®

PANSEMENT DE PLAIE DERMANET AG®
PANSEMENT AVEC BORDURE DERMANET AG®

Manufactured by:
DeRoyal Industries, Inc.
200 DeBusk Lane
Powell, TN 37849 USA
888.938.7828 or (001) 865.938.7828
www.deroyal.com

Part#757345
Revised 6/2021

©2021 DeRoyal Industries, Inc.

All Rights Reserved. DeRoyal, the DeRoyal logo, Improving Care. Improving Business., Multipad, Sofsorb, Polyderm, Stretch Net, Algidex Ag, Dermanet, and Dermanet Ag are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

INSTRUCTIONS FOR USE

APPLICATION OF DERMANET AG®+ WOUND DRESSING

1. Thoroughly cleanse wound.
2. Remove Dermanet Ag®+ dressing from the backing material.
3. Place Dermanet Ag®+ dressing over shallow wounds or pack into deep wounds.
4. Cover with appropriate secondary dressing (e.g. gauze, Multipad™ dressing, Sofsorb® dressing, Polyderm™ dressing, etc...) based upon amount of wound drainage.
5. Secure dressing in place as needed with tape, roll gauze or Stretch Net™ dressing.
6. Dermanet Ag®+ dressing can be worn up to five days depending on the amount of exudate and condition of the wound or until the secondary dressing is saturated and requires changing.

REMOVAL OF DERMANET AG®+ WOUND DRESSING

1. Remove secondary cover dressing.
2. Gently remove Dermanet Ag®+ dressing from wound. Irrigate wound with saline as needed to help loosen dressing.
3. Continue to thoroughly cleanse wound to remove wound drainage or any residue left by the Dermanet Ag®+ dressing.

APPLICATION OF DERMANET AG®+ BORDER DRESSING

1. Clean and thoroughly dry site.
2. Simultaneously peel release liner from center of dressing while aligning the Dermanet Ag+ dressing to the center over the site.
3. Press dressing into place.
4. Remove the "Top Clear Carrier Film" by lifting away at the tab.

uso externo y no pueden implantarse quirúrgicamente.

- Interrumpa el uso si aparecen síntomas de hipersensibilidad.

INSTRUCCIONES DE USO
APLICACIÓN DEL APOSITO DERMANET AG®+

1. Limpie a fondo la herida.
2. Retire el apósito Dermanet Ag®+ del dorso.
3. Coloque el apósito Dermanet Ag®+ sobre las heridas superficiales o introduzca y comprima en las heridas profundas.
4. Cubra con un vendaje secundario adecuado (gasa, apósitos Multipad™, Sofsorb®, Polyderm™, etc.) en función de la cantidad de drenaje de la herida.
5. Fije el apósito en su sitio mediante cinta adhesiva, un rollo de gasa o apósito Stretch Net™.
6. El apósito Dermanet Ag®+ se puede utilizar hasta cinco días, dependiendo de la cantidad de exudado y el estado de la herida, o hasta que se sature el vendaje secundario y resulte necesario cambiarlo.

EXTRACCIÓN DEL APOSITO PARA HERIDAS DERMANET AG®+

1. Retire el vendaje cobertor secundario.
2. Retire suavemente el apósito Dermanet Ag®+ de la herida. Irrigue la herida con solución salina para que se desprege el apósito.
3. Proceda a limpiar a fondo la herida para retirar su drenaje o los residuos que deje el apósito Dermanet Ag®+.

APLICACIÓN DEL APOSITO CON BORDE DERMANET AG®+

1. Limpie y seque por completo la zona.
2. Al mismo tiempo, retire el papel de protección del centro del apósito mientras acomoda el centro del apósito Dermanet Ag+ sobre la zona.
3. Presione el apósito en su lugar.
4. Retire la "Película superior del soporte transparente" levantando la pestaña.

REMOVAL OF DERMANET AG®+ BORDER DRESSING

1. Gently grasp a corner on the edge of the dressing and slowly pull the dressing from the skin in the direction of hair growth.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

Store this product in a cool, dry place. Dispose of this product in accordance with local, state, and federal guidelines.

	KEEP DRY
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT
	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED

Contents sterile unless package has been opened or damaged.

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

EXTRACCIÓN DEL APOSITO CON BORDE DERMANET AG®+

1. Suavemente agarre una esquina del apósito y tire lentamente de él en el sentido del nacimiento del vello.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Almacene este producto en un lugar fresco y seco. Deseche este producto de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

	MANTÉNGASE SECO
	MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ SOLAR
	NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO

El contenido es estéril a menos que el envase haya sido abierto o esté dañado.

Además de la autoridad competente en el país donde reside el paciente, cualquier incidente grave debe ser informado a DeRoyal Industries, Inc.

GARANTÍA

Los productos de DeRoyal tienen una garantía contra defectos de calidad y fabricación de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de envío de DeRoyal. **LAS GARANTÍAS ESCRITAS DE DEROYAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO.**

DERMANET AG® WOUND DRESSING
DERMANET AG® BORDER DRESSING

	USE BY DATE
	DO NOT REUSE
	STERILIZED USING IRRADIATION
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION

Please read all instructions, warnings and cautions before use. Correct application is essential for proper functioning of the product. Use only on the person it was provided to by a healthcare professional and only for the use it was intended.

GENERAL

Dermanet Ag®+ wound dressing is a combination of Dermanet® wound contact layer and Algidex Ag® Silver technology. The Dermanet® wound contact layer is an inert, non-adherent material that helps to shield and protect fragile granulation tissue. It helps to reduce trauma and pain that can be caused during dressing changes. The Algidex Ag® technology is a unique formulation of ionic silver combined in an alginate and Maltodextrin matrix. The Algidex Ag® formulation provides immediate and extended release of active ionic silver for broad antimicrobial effectiveness and helps to prevent contamination from external bacteria. The Algidex Ag® formulation decreases surface wound contaminates, decreases wound odor and creates a moist environment conducive to healing. The Maltodextrin creates an environment that helps the body's own cells to carry out the task of granulation tissue formation while eliminating wound odor.

APÓSITO PARA HERIDAS DERMANET AG®
APOSITO CON BORDE DERMANET AG®

	ÚSESE ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
	NO REUTILIZAR
	ESTERILIZADO CON RADIACIÓN
	NO REALIZADA CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
	LA LEY FEDERAL DE EE. UU. EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UNA PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO AUTORIZADO PARA EL USO Y LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada. Debe utilizarse únicamente en la persona para quien ha sido prescrito por un profesional sanitario, y solo para el uso previsto.

INFORMACIÓN GENERAL

El apósito para heridas Dermanet Ag®+ es una combinación de la capa de contacto con la herida Dermanet® y la tecnología de plata Algidex Ag®. La capa de contacto con la herida Dermanet® es un material inerte, no adherente que ayuda a proteger el frágil tejido de granulación. Contribuye a reducir el traumatismo y dolor que el paciente puede experimentar durante los cambios de vendaje. La tecnología de Algidex Ag® es una formulación exclusiva de plata iónica combinada en una matriz de alginato y maltodextrina. La formulación de Algidex Ag® ofrece una liberación inmediata y extendida de plata iónica activa para una amplia eficacia antimicrobiana y ayuda a evitar la contaminación con bacterias externas. La formulación de Algidex Ag® reduce los contaminantes de la herida superficial, reduce el olor en la herida y crea un entorno húmedo propicio para la curación. La maltodextrina crea un entorno que ayuda a las células del cuerpo a realizar la tarea de formulación del tejido de granulación a la vez que elimina el olor en la

Local wound care cannot overcome the deficits of unrelieved malnutrition, pressure or trauma, or compromised blood flow. Interventions must be instituted to reduce/relieve these factors that contribute to impaired wound healing in order to achieve the optimum outcome.

INTENDED USE

Dermanet Ag®+ dressings can be used on infected and non-infected wounds, including dermal ulcers (e.g. leg ulcers, pressure ulcers), diabetic ulcers, abdominal wounds, superficial wounds, lacerations, cuts, surgical incisions, abrasions, donor sites, and burn wounds.

INDICATIONS

Dermanet Ag®+ dressings are used for the management of multiple wounds including:

- Pressure Ulcers
- Venous Ulcers
- Dermal lesions (or secreting skin injuries)
- Burn injuries
- Donor sites
- Lacerations
- Surgical Incisions
- Vascular Access Sites

CONTRAINDICATIONS

Dermanet Ag®+ dressings should not be used on:

- Patients with known sensitivity to alginates
- Third degree burns

CAUTIONS

- When visible signs of infection are present in the wound, it is recommended to address the cause of the infection with proper systemic medical treatment as needed along with topical application of the Dermanet Ag®+ dressing.
- Dermanet Ag®+ dressings are for external use and may not be surgically implanted.
- Discontinue use if signs of sensitivity appear.

herida.

El cuidado localizado de las heridas no puede suplir las carencias debidas a la malnutrición no tratada, la presión o los traumatismos, o el flujo sanguíneo deficiente. Para obtener un resultado óptimo, se deberá intervenir para reducir/eliminar estos factores que contribuyen a impedir la curación de las heridas.

USO PREVISTO

Los apósitos Dermanet Ag®+ se pueden usar sobre heridas infectadas y no infectadas, incluidas úlceras cutáneas (por ej., úlceras de pierna y úlceras por presión), úlceras diabéticas, heridas abdominales, heridas superficiales, laceraciones, cortes, incisiones quirúrgicas, abrasiones, zonas de donación y quemaduras.

INDICACIONES

Los apósitos Dermanet Ag®+ se usan en el tratamiento de varias heridas, tales como:

- Úlceras por presión
- Úlceras venosas
- Lesiones dérmicas (o heridas cutáneas con secreciones)
- Lesiones por quemaduras
- Zonas de donación
- Laceraciones
- Incisiones quirúrgicas
- Zonas de acceso vascular

CONTRAINDICACIONES



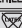


Los apósitos Dermanet Ag®+ no deben usarse en:

- Pacientes con hipersensibilidad conocida a los alginatos
- Quemaduras de tercer grado

PRECAUCIONES

- Si la herida muestra signos visibles de infección, se recomienda abordar la causa de la infección con el tratamiento médico sistémico adecuado, según sea necesario, junto con la aplicación tópica del apósito Dermanet Ag®+.
- Los apósitos Dermanet Ag®+ son para

CURATIVO PARA FERIDAS DERMANET AG® CURATIVO DE BORDA DERMANET AG®

	DATA DE VENCIMENTO
	NÃO REUTILIZAR
	ESTERILIZADO COM IRRADIÇÃO
	NÃO É FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL
	A LEGISLAÇÃO FEDERAL DOS EUA RESTRINGE A VENDA OU UTILIZAÇÃO DESTES DISPOSITIVOS PARA OU MEDIANTE A PRESCRIÇÃO DE UM MÉDICO OU PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTORIZADO.


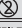
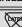


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia todas as instruções, avisos e precauções antes de usar. A aplicação correta é essencial para o funcionamento adequado do produto. Usar somente na pessoa para a qual um profissional de saúde tenha fornecido o produto por um e somente para o uso pretendido.

GERAL

O curativo para feridas Dermanet Ag®+ é uma combinação entre a camada Dermanet® de contato com a ferida e a tecnologia do Algidex Ag® Prata. A camada Dermanet® de contato com a ferida apresenta um material inerte, não aderente, que ajuda a cobrir e proteger o frágil tecido de granulação. Ajuda a reduzir o trauma e a dor que possam ser causados durante as trocas de curativos. A tecnologia Algidex Ag® é uma formulação exclusiva de prata iônica combinada em uma matriz de alginato e maltodextrina. A formulação do Algidex Ag® proporciona a libertação imediata e extensa de prata iônica ativa para uma eficácia antimicrobiana abrangente, ajudando a prevenir a contaminação por bactérias externas. A formulação do Algidex Ag® diminui a superfície da ferida sujeita a contaminantes, diminui o odor e cria um ambiente de umidade ideal que conduz à cura. A maltodextrina cria um ambiente que ajuda as células do próprio corpo a realizarem a tarefa de formação de tecido de granulação, ao mesmo tempo que elimina o odor da ferida.

PANSEMENT DE PLAIE DERMANET AG® PANSEMENT AVEC BORDURE DERMANET AG®

	DATE LIMITE D'UTILISATION
	NE PAS RÉUTILISER
	STÉRILISÉ PAR IRRADIATION
	NON FABRIQUÉ EN LATEX NATUREL
	LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR OU SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.

INFORMATION IMPORTANTE

Avant l'utilisation, lire l'ensemble des instructions, avertissements et précautions. Une application correcte est essentielle pour assurer la parfaite efficacité du produit. Utiliser uniquement sur la personne à laquelle le dispositif a été prescrit par un professionnel de santé et uniquement pour l'usage prévu.

DONNÉES GÉNÉRALES

Le pansement de plaie Dermanet Ag®+ est une association de la couche de contact avec la plaie Dermanet® et de la technologie à l'alginate d'argent Algidex Ag®. La couche de contact avec la plaie Dermanet® est une matière inerte et non adhérente qui permet de recouvrir et protéger le tissu de granulation fragile. Elle permet de réduire le trauma et la douleur pouvant être occasionnés lors des réfections des pansements. La technologie Algidex Ag® est une formule unique d'argent ionique allié à une matrice d'alginate et de maltodextrine. La formule Algidex Ag® libère immédiatement et largement de l'argent ionique actif pour créer une protection antimicrobienne large qui permet de prévenir toute contamination par des bactéries externes. La formule Algidex Ag® diminue le risque de contamination de la plaie, réduit l'odeur de la plaie et crée un milieu humide favorable à la cicatrisation. La Maltodextrine crée un milieu qui permet aux cellules corporelles de former le tissu de granulation tout en éliminant l'odeur de la plaie.

O tratamento local de feridas não pode superar os déficits de desnutrição, pressão ou trauma não aliviados ou o fluxo sanguíneo comprometido. Intervenções devem ser instituídas para reduzir/aliviar fatores que contribuem para a cicatrização prejudicada da ferida, para alcançar o resultado ideal.

FINALIDADE DE USO

Os curativos Dermanet Ag®+ podem ser usados em feridas infectadas e não infectadas, incluindo úlceras cutâneas (por ex. úlceras de perna, úlceras de pressão), úlceras diabéticas, feridas abdominais, feridas superficiais, lacerações, cortes, incisões cirúrgicas, escoriações, áreas doadoras e queimaduras.

INDICAÇÕES

Os curativos Dermanet Ag®+ são usados para tratar múltiplas feridas, tais como:

- Úlceras por pressão
- Úlceras venosas
- Lesões dérmicas (ou ferimentos da pele com secreção)
- Queimaduras
- Locais de doação
- Lacerações
- incisões cirúrgicas
- Locais de acesso vascular

CONTRAINDICAÇÕES

Os curativos Dermanet Ag®+ não devem ser usados em:

- Pacientes com sensibilidade conhecida aos alginatos
- Queimaduras de terceiro grau

! CUIDADOS

- Quando houver sinais visíveis de infecção presentes na ferida, recomendamos tratar sistemicamente a causa da infecção, conforme a necessidade, juntamente com a aplicação tópica do curativo Dermanet Ag®+.

Le soin local d'une plaie ne peut en aucun cas compenser les défaillances liées à une malnutrition, une pression ou un traumatisme non pris en charge, ou à un flux sanguin défaillant. Afin d'obtenir un résultat optimal, il est nécessaire d'intervenir afin de réduire/soulager ces facteurs qui contribuent à perturber la cicatrisation de la plaie.

USAGE PRÉVU

Les pansements Dermanet Ag®+ sont indiqués pour des plaies infectées ou non, y compris des ulcères cutanés (par exemple plaies des jambes, plaies de pression), des ulcères diabétiques, des plaies abdominales, des plaies superficielles, des lacerations, des coupures, des incisions opératoires, des abrasions, des sites donneurs et des plaies par brûlure.

INDICATIONS

Les pansements Dermanet Ag®+ sont utilisés pour la gestion de diverses plaies, notamment :

- Ulcères de pression
- Ulcères veineux
- Lésions cutanées (ou lésions cutanées avec sécrétions)
- Brûlures
- Sites donneurs
- Lacerations
- Incisions chirurgicales
- Sites d'accès vasculaire

CONTRE-INDICATIONS

Les pansements Dermanet Ag®+ ne doivent pas être utilisés dans les cas suivants :

- Patients ayant une sensibilité connue aux alginates
- Brûlures au troisième degré

! MISES EN GARDE

- Si la plaie présente des signes d'infection, il est recommandé d'utiliser le pansement Dermanet Ag®+ (en application topique) conjointement

- Os curativos Dermanet Ag®+ se destinam ao uso externo e não podem ser implantados cirurgicamente.
- Interrompa o uso em caso de sinais de sensibilidade.

INSTRUÇÕES DE USO

APLICAÇÃO DO CURATIVO PARA FERIDAS DERMANET AG®+

1. Limpe profundamente a ferida.
2. Remova o curativo Dermanet Ag®+ do revestimento protetor.
3. Coloque o Dermanet Ag®+ sobre feridas superficiais ou use-o para preenchimento de feridas profundas.
4. Cubra com o curativo secundário apropriado (p.ex., gaze, Multipad™, Sofsorb®, Polyderm™, etc.) com base na quantidade de secreção da ferida.
5. Prenda o curativo, conforme necessário, com adesivo, gaze em rolo ou Stretch Net™.
6. O curativo Dermanet Ag®+ pode ser usado por até cinco dias, dependendo da quantidade de exsudato e condição da ferida, ou até o curativo secundário estar saturado e necessitar de troca.

REMOÇÃO DO CURATIVO PARA FERIDAS DERMANET AG®+

1. Remova o curativo de cobertura secundário. Remova cuidadosamente o curativo Dermanet Ag®+ da ferida. Irgue a ferida com solução salina, conforme necessário, para ajudar a soltar o curativo.
3. Continue a limpar profundamente a ferida para remover a secreção ou qualquer resíduo que reste do Dermanet Ag®+.

APLICAÇÃO DO CURATIVO DE BORDA DERMANET AG®+

1. Limpe e seque totalmente o local.
2. Descole simultaneamente a película a partir do centro do curativo e, ao mesmo tempo, alinhe o centro do curativo Dermanet Ag+

avec un traitement médical systématique adapté afin de traiter la cause de l'infection.

- Les pansements Dermanet Ag®+ sont réservés à un usage externe et ne peuvent pas être implantés par voie chirurgicale.
- Ne plus utiliser en cas de signes de sensibilité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

APPLICATION DU PANSEMENT DE PLAIE DERMANET AG®+

1. Bien nettoyer la plaie.
2. Décoller le pansement Dermanet Ag®+ du support.
3. Mettre le pansement Dermanet Ag®+ sur les plaies superficielles ou tasser dans les plaies profondes.
4. Recouvrir avec un pansement secondaire adapté (type gaze, pansement Multipad™, pansement Sofsorb®, pansement Polyderm™, etc.) en fonction de la quantité de drainage de la plaie.
5. Si besoin, maintenir le pansement en place avec une bande adhésive, un ruban de gaze ou un pansement Stretch Net™.
6. Le pansement Dermanet Ag®+ peut être porté cinq jours en fonction de la quantité d'exsudat et de l'état de la plaie ou jusqu'à ce que le pansement secondaire soit saturé et que son changement s'impose.

RETRAIT DU PANSEMENT DE PLAIE DERMANET AG®+

1. Retirer le pansement secondaire.
2. Décoller doucement le pansement Dermanet Ag®+ de la plaie. Si besoin, mouiller la plaie avec une solution saline pour décoller le pansement.
3. Continuer à bien nettoyer la plaie pour éliminer le drainage de la plaie ou tout résidu que Dermanet Ag®+ aurait laissé.

APPLICATION DU PANSEMENT AVEC BORDURE DERMANET AG®+

1. Nettoyer et bien sécher le site.




3. Pressione o curativo no lugar.
4. Remova o filme de suporte superior levantando a aba.

REMOÇÃO DO CURATIVO DE BORDA DERMANET AG®+

1. Pegue levemente um canto da borda do curativo e puxe da pele levemente na direção do crescimento dos pelos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazene este produto em local fresco e seco. Descarte este produto de acordo com as diretrizes locais, estaduais e federais.

	MANTER SECO
	MANTER LONGE DA LUZ SOLAR
	NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA

Conteúdo estéril, a menos que a embalagem tenha sido aberta ou danificada.

Além da autoridade competente no país de residência do paciente, incidentes graves também devem ser comunicados à DeRoyal Industries.

GARANTIA

Os produtos DeRoyal possuem garantia por cento e vinte (120) dias a partir da data de expedição pela mesma, em relação à qualidade do produto e à mão de obra. **AS GARANTIAS POR ESCRITO DA DEROYAL SÃO FORNECIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPOSITO.**




2. Décoller simultanément la protection en partant du centre du pansement, tout en alignant le centre du pansement Dermanet Ag+ sur le site.
3. Poser le pansement en appuyant dessus.
4. Retirer le « Film de protection transparent » en soulevant la languette.

RETRAIT DU PANSEMENT AVEC BORDURE DERMANET AG®+

1. Saisir un coin sur le côté du pansement et tirer doucement sur le pansement dans le sens du poil.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Stocker ce produit dans un endroit frais et sec. Mettre ce produit au rebut conformément aux directives locales et nationales.

	GARDER AU SEC
	TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL
	NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ

Contenu stérile, sauf si l'emballage a été ouvert ou endommagé.

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLÍCITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE ARTICULIER.**