



Application Video






How the BOA®
 Fit System works.




For questions or concerns regarding your DeRoyal spine brace, please contact our customer service line at

1(800)-DEROYAL or customerservice@deroyal.com.


They will direct you to a dedicated spine specialist that can address your needs or answer questions regarding your spine brace.

PUTTING ON YOUR BRACE:

1. Ensure both dials are released and in the “pulled out” position 
2. Wrap the brace belts around your torso and align the back panel to the center of your back (stand with your back against a wall to prop up the brace to assist, if needed).
 The gray face of the left belt should attach to the front panel gray hook (if not already attached). See illustration A & B.
3. Wrap the right side of the belt over the left side using the hand strap and ensure the right oval belt front completely overlaps the left oval belt front.
4. Raise or lower the sternal pad bar as needed by pinching the adjustment mechanism (A) and sliding the bar up or down. The top of the chest frame should be positioned ~4” below your collarbones and in the center of your chest.
5. Buckle the shoulder straps to the sternal pad and tighten, if needed.
6. Push dials in and turn clockwise evenly to provide compression.  
 The brace should fit snug but not too tight.

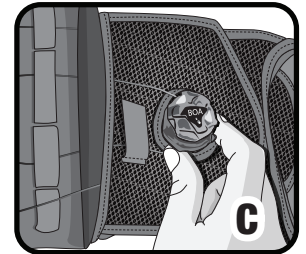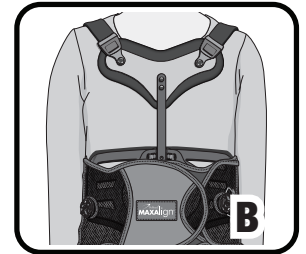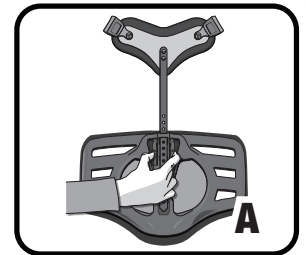

TAKING OFF YOUR BRACE:

1. Pull out on both dials to release compression 
2. Unbuckle the right shoulder buckle and use the hand strap to open the brace. Slide the brace off and set aside until it is needed for future use.



**PUSH IN
 TO ENGAGE**



**TIGHTEN
 TURN FOR
 PRECISION FIT**



**PULL UP FOR FAST
 RELEASE**

Care Instructions:

Remove panels from the brace and clean all soft goods by hand washing with mild soap and let air dry completely prior to reapplication. Anterior and posterior panels can be cleaned by wiping down with a disinfectant wipe.

This Quick Reference Guide does not supersede the instructions given by a prescriber or the information contained in the Instructions for Use (IFU) which accompany this device. Please refer to the IFU for all warnings, cautions and complete instructions.

WARRANTY

DEROYAL® PRODUCTS ARE WARRANTED FOR NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF SHIPMENT FROM DEROYAL AS TO PRODUCT QUALITY AND WORKMANSHIP. DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.



©2023 DeRoyal Industries, Inc. | All Rights Reserved.
 The DeRoyal logo and MAXAlign are registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.
 Boa is a registered trademark of Boa Technology Inc.
 Part # 0-2201 | Reprint # 0-2572 | Revised 5/2023






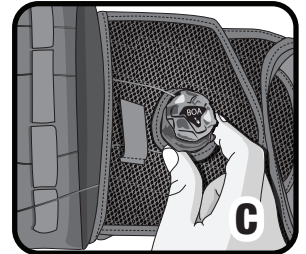
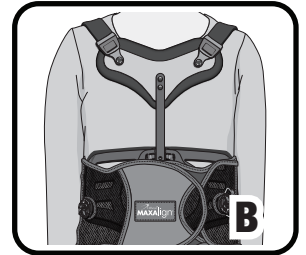
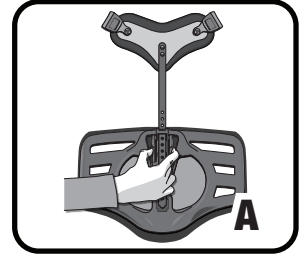
Video de colocación




Cómo funciona
el sistema de
ajuste BOA®.

COLOCACIÓN DE LA ORTESIS:

1. Verifique que ambas ruedas estén liberadas y en la posición "hacia afuera" 
 2. Envuelva los cinturones de la ortesis alrededor de su torso y alinee el panel posterior con el centro de su espalda (párese con la espalda contra una pared para apoyar la ortesis, si es necesario)
La cara gris del cinturón izquierdo debe sujetarse al panel frontal con microgranchos gris (si ya no se encuentra sujeto). Vea las ilustraciones A y B
 3. Envuelva la correa derecha del cinturón sobre el lado izquierdo usando la correa de mano y verifique que el frente ovalado derecho se superponga completamente sobre el frente ovalado izquierdo
 4. Suba o baje la barra de la almohadilla esternal presionando el mecanismo de ajuste (A) y deslizando la barra hacia arriba o hacia abajo. La parte superior de la montura para tórax debe posicionarse a ~4" por debajo de la clavícula y en el centro de su pecho
 5. Cierre la hebilla de las correas para tórax a la almohadilla esternal y ajuste, si es necesario
 6. Presione las ruedas y gírelas en sentido horario de manera uniforme para generar compresión.  
- La ortesis debe quedar ceñida, pero no demasiado ajustada



RETIRO DE LA ORTESIS:

1. Tire de ambas ruedas hacia fuera para liberar la compresión 
2. Libere la hebilla del hombro derecho y use la correa de mano para abrir la ortesis.
Retire la ortesis y déjela apartada hasta que vuelva a necesitarla en un futuro



**PRESIONE PARA
ACOPLAR**



**AJUSTE
GIRE PARA UN
AJUSTE DE
PRECISIÓN**



**LEVANTE
PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE**

Instrucciones para el cuidado:

Retire los paneles de la ortesis y lave todos los componentes blandos a mano con un jabón suave, luego deje secar al aire completamente antes de volver a aplicarlos. Los paneles anterior y posterior pueden limpiarse con una toallita húmeda desinfectante.

Por dudas o consultas referidas a su ortesis para columna vertebral DeRoyal, por favor comuníquese con nuestra línea de servicio al cliente al **1(800)-DEROYAL** o **customerservice@deroyal.com**. Lo pondrán en contacto con un especialista en columna vertebral que podrá resolver sus necesidades y consultas referidas a su ortesis.

Esta Guía de referencia rápida no reemplaza las instrucciones brindadas por el prescriptor o la información incluida en las Instrucciones de uso (IFU) que acompañan este dispositivo. Por favor, consulte las IFU para obtener advertencias, precauciones e instrucciones completas.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS DEROYAL® TIENEN UNA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE CALIDAD Y FABRICACIÓN DE NOVENTA (90) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO DE DEROYAL. **LAS GARANTÍAS ESCRITAS DE DEROYAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.**