



## Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
 <b>REF</b>	Υποδηλώνει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	EN 980, Ενότητα 5.10	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.6	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις επικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2493	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Αριθμός καταλόγου ή μοντέλου</b>			
 <b>LOT</b>	Υποδηλώνει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η παρτίδα ή το φορτίο.	EN 980, Ενότητα 5.4	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις επικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2492	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Κωδικός παρτίδας</b>			
 <b>SN</b>	Υποδηλώνει τον αριθμό σειράς του κατασκευαστή έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν.	EN 980, Ενότητα 5.5	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.7	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις επικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2498	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Αριθμός σειράς</b>			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο χρειάζεται να προστατευτεί από την υγρασία.	EN 980, Ενότητα 5.21	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις επικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-0626	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Να διατηρείται στεγνό</b>			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο χρειάζεται προστασία από φωτεινές πηγές.	EN 980, Ενότητα 5.20	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 53.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις επικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-0624	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Να διατηρείται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία</b>			
	Υποδηλώνει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.	EN 980, Ενότητα 5.12	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.1	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις επικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-3082	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Κατασκευαστής</b>			
	Υποδηλώνει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.	EN 980, Ενότητα 5.6	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.3	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις επικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2497	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Ημερομηνία κατασκευής</b>			
 <b>Rx Only</b>	Απαιτείται συνταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες.	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Επισήμανση-Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: σπουδαιότητα των απαιτούμενων δηλώσεων ετικέτας.
		21 CFR 801.109	Επισήμανση-Προϊόντα κατόπιν ιατρικής συνταγής.
<b>Μόνο με ιατρική συνταγή</b>			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει καταστραφεί ή ανοιχτεί η συσκευασία.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.8	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις επικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2606	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Να μη χρησιμοποιηθεί αν η συσκευασία έχει καταστραφεί</b>			



## Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα









Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισήμανσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
	Υποδηλώνει την παρουσία φυσικού καουτσούκ ή λατέξ από φυσικό ξηρό καουτσούκ ως κατασκευαστικό υλικό εντός του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή της συσκευασίας ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος.	EN 980, Ενότητα 6.2	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
<b>Περιέχει φυσικό καουτσούκ ή λατέξ</b>		ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει την ημερομηνία μετά την οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.	EN 980, Ενότητα 5.3	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
<b>Ανάλωση έως</b>		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει στον χρήστη την ανάγκη να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης.	ISO 7000-2607	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης</b>		EN 980, Ενότητα 5.18	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.3	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει στον χρήστη την ανάγκη να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης για σημαντικές προειδοποιητικές πληροφορίες όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που δεν είναι δυνατό, για διάφορους λόγους, να βρισκονται πάνω στο ίδιο το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	IEC 60601-1, Πίνακας D.1, Σύμβολο 11	Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση.
		ISO 7000-1641	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Προσοχή</b>		EN 980, Ενότητα 5.11	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο προορίζεται για μία χρήση ή για χρήση σε έναν μόνον ασθενή στο πλαίσιο μίας και μόνο διαδικασίας.	IEC 60601-1, Πίνακας D.1, Σύμβολο 10	Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση.
		EN 980, Ενότητα 5.2	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
<b>Να μην επαναχρησιμοποιείται</b>		ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/φυλλάδιο οδηγιών.	ISO 7000-1051	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</b>		IEC 60601-1, Πίνακας D.2, Σύμβολο 10	Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση.
	Σημαίνει Ευρωπαϊκή τεχνική συμμόρφωση.	765/2008/EK 768/2008/EK MDD 93/42/EOK Άρθρα 4,11,12,17, Παράρτημα II)	Οι απαιτήσεις διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων· Οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
<b>Σήμανση CE</b>		EN 980, Ενότητα 5.13	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
	Υποδηλώνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.	EN 980, Ενότητα 5.13	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
<b>Εξουσιοδοτημένος ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος</b>		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.



## Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα








Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
	Υποδηλώνει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία μπορεί να εκτίθεται με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	EN 980, Ενότητα 5.17.3	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.7	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-0632	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης</b>			
	Υποδηλώνει το κατώτερο όριο θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να εκτίθεται με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.5	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		EN 980 35.17.1	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-0534	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Κατώτερο όριο θερμοκρασίας αποθήκευσης</b>			
	Υποδηλώνει το ανώτερο όριο θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να εκτίθεται με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.6	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		EN 980 5.17.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-0533	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Ανώτερο όριο θερμοκρασίας αποθήκευσης</b>			
	Υποδηλώνει το εύρος υγρασίας στο οποίο μπορεί να εκτίθεται με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.8	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 7000-2620	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Περιορισμός υγρασίας</b>			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο δεν πρέπει να επαναποστειρωθεί.	EN 980, Ενότητα 5.22	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.6	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2608	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Να μην επαναποστειρώνεται</b>			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης.	EN 980, Ενότητα 5.23	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.7	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2609	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Μη αποστειρωμένο</b>			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης.	EN 980, Ενότητα 5.7	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.1	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2499	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Προϊόν το οποίο έχει υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης</b>			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αποστειρωθεί με τη χρήση ακτινοβολίας.	EN 980, Ενότητα 5.8.3	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2502	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Αποστειρωμένο με τη χρήση ακτινοβολίας</b>			



## Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

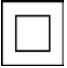

Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αποστειρωθεί με τη χρήση άσηπτων τεχνικών.	EN 980, Ενότητα 5.9	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
<b>Αποστειρωμένο με τη χρήση άσηπτων τεχνικών</b>		ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2500	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αποστειρωθεί με τη χρήση αιθυλενοξειδίου.	EN 980, Ενότητα 5.8.2	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
<b>Αποστειρωμένο με τη χρήση αιθυλενοξειδίου</b>		ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.3	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2501	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αποστειρωθεί με τη χρήση ατμού ή ξηράς θερμότητας.	EN 980, Ενότητα 5.8.4	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
<b>Αποστειρωμένο με τη χρήση ατμού ή ξηράς θερμότητας</b>		ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2503	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
	Υποδηλώνει την ύπαρξη δυνητικών βιολογικών κινδύνων που συνδέονται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	EN 980 5.19	Σύμβολα προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
<b>Βιολογικοί κίνδυνοι</b>		ISO 15223 5.4.1	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-0659	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
	Συσκευή με διπλή μόνωση	IEC 60417-5172	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Συσκευή με διπλή μόνωση</b>			
	Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF	IEC 60417-5333	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF</b>			
	Κατατάσσει και αξιολογεί τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα/κέλυφος της ηλεκτρικής συσκευής.  • Προστασία από στερεά σώματα > 12,5 mm·  • Προστασία από νερό που ψεκάζεται από γωνία έως και 15 από τον κάθετο άξονα	IEC 60529*	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
<b>Κωδικός IP, Διεθνής σήμανση προστασίας</b>		*(δεν έχει αριθμό αναφοράς για 60601-1 [2005] σ.645)	



## Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
 <b>Ασφαλές για MR</b>	Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία	ASTM F2503	Τυπική πρακτική σήμανσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων ειδών για ασφάλεια στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού.
 <b>Ασφαλές για MR υπό προϋποθέσεις</b>	Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις	ASTM F2503	Τυπική πρακτική σήμανσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων ειδών για ασφάλεια στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού.
 <b>Επισφαλές για MR</b>	Επισφαλές για μαγνητική τομογραφία	ASTM F2503	Τυπική πρακτική σήμανσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων ειδών για ασφάλεια στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού.